



折りたたみ シャワーチェア 樂湯 DX 7250

摺疊
淋浴椅

[取扱説明書] (保管用)

請務必閱讀本使用說明書並妥善保管。

非常感謝您這次購買我們的產品。
使用前請務必閱讀本說明書,充分理解後再使用。
閱讀後請妥善保管,必要時請重新閱讀。
購買時請諮詢護理經理或福利用具專門諮詢員等專家,瞭解自己的身體狀況,
請告知狀態,並聽取適當的選擇和試穿等建議後使用。



目 錄

使用前注意事項(檢查).....	1
警告事項.....	1
各部分名稱.....	2
使用方法.....	2
展開方法.....	2
摺疊方法.....	2
調整座面高度.....	3
扶手的使用方法.....	3
調節靠背高度.....	3
淋浴器支架的使用方法.....	4
保養方法.....	4
座面·靠背墊的拆裝.....	4
本體及吸盤的保養.....	4
注意事項.....	4
零件價格.....	5
保證書.....	5



關於本使用說明書,如有疑問或疑問,請確認。
請諮詢我們的服務人員或購買銷售店。

英屬開曼島群商勝邦福樂智股份有限公司
台灣分公司 ☎ 02-2986-0551

使用時，根據身體狀況可能會有危險，
請充分注意。

為防止跌倒或故障，請務必遵守以下事項。

⚠ 使用前的注意事項（檢查）

- 展開時等進行開閉操作時，請勿使嬰幼兒或兒童靠近。
- 展開時請充分注意不要夾住手或手指。
- 請切實進行組裝及調整。
- 請檢查產品各部分。
- 檢查、確認各部分的螺釘、螺母是否鬆動，是否有鐵鏽、腐蝕、破損等異常。
請幫我做。
- 4根腳部全部設定為相同高度，可切實安裝高度調節用鎖釦
- 請務必確認是否進行了。（可能會導致跌倒、受傷）
- 使用者無法充分穩定自己身體時，請務必在護理人員的陪同下
請使用。
- 根據使用者的身體狀況，請停止使用，或者由護理人員陪同等適當的
請做出判斷。
- 請確認座面背面的鎖定是否牢固。（突然摺疊，否則可能會摔倒。）
- 請勿在橡膠蓋脫落的狀態下使用。（可能會導致摔倒或受傷）

⚠ 警告事項（可能會意外受傷）

- 請務必在平坦、穩定的場所使用。
- 請不要代替墊腳石。
- 請勿置於嬰幼兒或兒童觸及的地方。
- 請勿淺坐在座面上。
- 從座面站起來時，請慢慢進行。
- 對靠背或扶手施加過大的負荷時，本體可能會移動或翻倒。
因為有，所以請充分注意。
- 坐着或站起來時，不要只靠單側扶手支撐。
- 請勿以靠背為支撐進行移動或站立。
- 請勿在人坐着的狀態下拿着本體移動。
- 請勿用於其他用途。
- 最大用戶體重為100kg。（僅限於使用者的體重低於100kg者）
- 不要擺出氣勢洶洶地要倒下的姿勢。
- 坐下時，請坐在座位中央，使體重均勻增加。
- 使用香皂或洗髮水等，與坐面或地板接觸的部分容易打滑，請充分注意。
請幫我做。

各部位名稱

使用時尺寸:約 H67.5~79XW50XD45~52cm
 座面高度:約 37~47cm 5 段灰度(約 2.5cm 間距)
 靠背高度:2 階段調節(約 3cm 間距)
 材質:本體/鋁(粉體塗裝)、座面/靠背墊/EVA、扶手/PP、
 座部/靠背/PE 橡膠帽/TPR
 高度調節用鎖定按鈕(彈簧)/不鏽鋼

重量:約 3.9kg
 最大使用者體重:100kg
 耐熱溫度:80C

摺疊尺寸
 高度:約 76.5cm
 寬度:約 50cm
 深度:約 22cm




使用方法

展開方法

- ①將座面向前傾倒，從上方按壓座面，座面背面鎖定"咔嚓"會發出聲音，被鎖住。
- ②根據需要將扶手放低至水平。

摺疊法

- ①將座面向上拉起，則座面背面鎖定脫落後摺疊。
- ②把扶手擡起來。

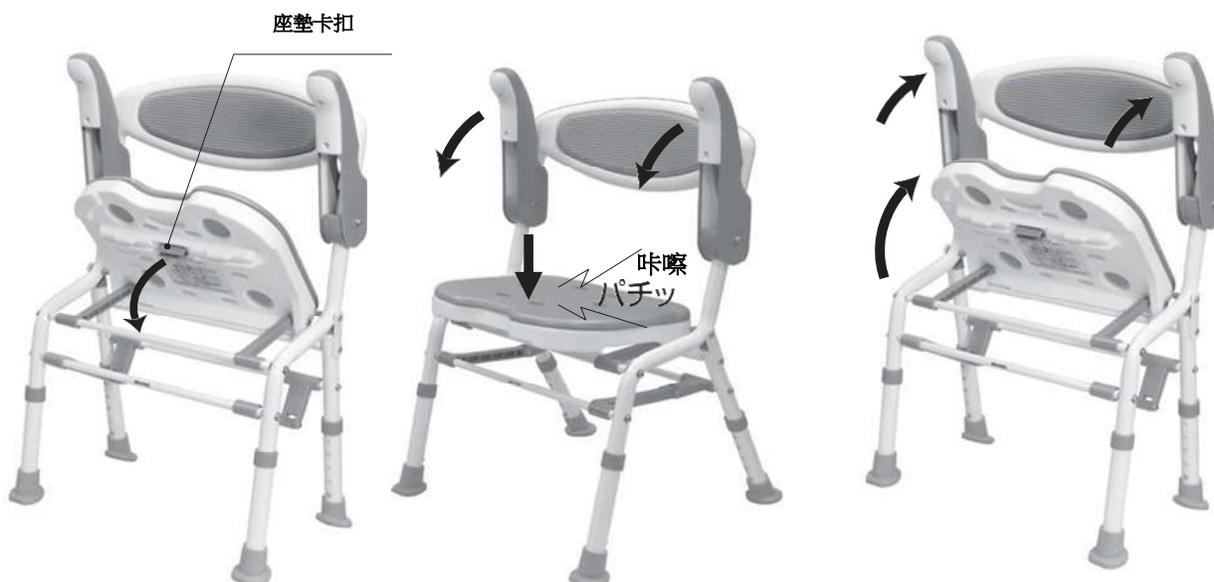


- 注**
- ※ 上下移動扶手時，請充分注意不要夾住手或手指。
 - ※ 摺疊或展開時，請注意不要夾住手或手指。
 - ※ 請確認座面背面鎖是否牢固固定。

座面高度調整

- 座面高度可從 37cm 到 47cm 分 5 個階段進行調節。
- 調整高度時，請按住鎖定按鈕，同時拉動下腿管。另外，最佳高度是坐着膝蓋彎曲成直角，腳掌完全貼在地板上。當鎖釦發出"咔嗒"聲時，如果卡在手孔裏，就完成了套裝。
- 進行高度調節時，請正確設置4根腳部下管的高度相同。

注

- ※ 4 根腳部下管全部設定為相同高度，高度必須確保調節用鎖定按鈕已切實設置請確認一下。
- 未設置為相同高度時或鎖定按鈕可靠否則可能會導致摔倒受傷。
- ※請確認橡膠蓋是否脫落。
- ※高度調節部的鎖定按鈕的彈簧（不鏽鋼制）使用狀況可能會生鏽或腐蝕，敬請注意。

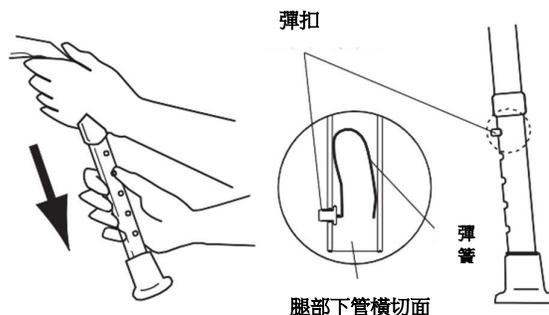

扶手使用方法

扶手可以根據需要上下調整。

在放下扶手的狀態下使用

- 站立時支撐身體或就座時確保穩定。

注

- ※ 坐在座面上或站立時，請均勻地放在左右扶手處請勿單側使用時扶手，可能會導致摔倒受傷。請充分注意。

扶手向上時使用

- 通過抬起扶手，在坐着狀態下使身體可以左右旋轉。可以有效利用狹窄的空間。

注

- ※ 請勿以抬起的扶手為支撐物站立。非常危險。
- ※ 上下移動扶手時，請充分注意不要夾住手或手指。



調節靠墊高度

靠背高度可調節 3cm（2 段）。


- 在靠背的後面。按左右按鈕，把椅背也拉調整。
- 一邊按下單側的按鈕，一邊稍微拉一下靠背，然後按住對面的按鈕，一起拉動。左右兩邊的彈簧發出"咔嗒"聲，嵌入孔中即可完成設置。

注

- ※ 坐着的時候，請勿過度地蹲着靠背向上用力，請必須注意不要發生。
- ※高度調節部的按鈕彈簧（不鏽鋼制）在使用狀況下因此可能會生鏽或腐蝕，敬請注意。



蓮蓬頭插座使用方式

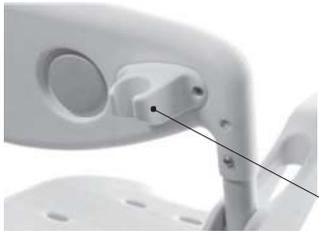

蓮蓬插座

請根據需要使用淋浴支架。

- 注** ※ 蓮蓬頭水管有可能會卡在椅腳上或有可能會發生摔倒，請必須注意。

保養方式


座面、靠背墊的裝卸方法

① 墊子的拆卸方法從座面、靠背背面按壓推杆部。
可拆卸墊子。

② 墊子的安裝方法

將墊背面的凸部與座面、靠背的孔

對準後從上往下用力按壓。(座面不要弄錯推杆的前後和靠背推杆的上下請小心。在靠背推杆後面有一個"上"字，標有"符號")

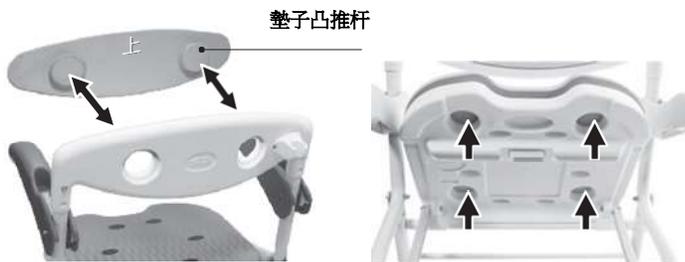

墊子凸推杆

主體及墊子保養方法

● 將稀釋的中性洗滌劑放入海綿或柔軟的布中
去除污垢後，用清水清洗洗滌劑沖洗乾淨，
用乾布擦拭。

注 ※ 不使用刷子、磨粉、裝有研磨材料的海綿等請不要做。

※ 洗滌劑（氯系、酸性、鹼性）、稀釋劑、切勿使用甲酚等。

使用其他藥劑進行殺菌消毒或溫泉水請注意使用哪種產品。（比如塑料，金屬劣化或破損，成爲受傷原因有時也會這樣。）



△警告事項

<環境>●請勿置於火旁。樹脂變形，無法維持性能。

<使用前>●使用者無法充分穩定自身身體時，請務必由護理人員陪同。

●根據使用者的身體狀況，請做出停止使用或由護理人員陪同等適當的判斷。

●如有橡膠蓋破損或磨損等異常，請立即更換。

<使用中>●請勿用於其他用途。

●最大用戶體重爲 100kg。體重超過 100 公斤

●超過者不能使用。

●請在浴池使用。請不要在浴槽內使用。

●坐下的時候請慢慢坐在座位的中央。

●請不要坐着移動。

●請勿作爲踏板使用。

<維護>●請勿放置在緊急出口、滅火器、滅火栓前。

●請確認各部分有無破損、鬆動。

●請勿進行改造等。

<廢棄>●請按照各地方行政區、社區的指示進行處理、廢棄。

※為改良產品，規格、外觀可能會有變更，恕不另行通知。



英屬開曼群島商勝邦福樂智股份有限公司台灣分公司
展示中心:新北市汐止區南陽街 258 號 6 樓
服務電話:(02) 2986-0551

MADE IN CHINA 20.5 R-DX